

# Διαβάστε τις οδηγίες πριν την ένεση




## Προσαρμόστε τη βελόνα



**Αφαιρέστε** το καπάκι της πένα. Αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο κάλυμμα από το εξωτερικό καπάκι της βελόνας.



**Προσαρμόστε** τη βελόνα πιέζοντας το κοχλιοτομημένο άκρο (σπείρωμα βιδώματος) της πένα μέσα στο εξωτερικό καπάκι της βελόνας.

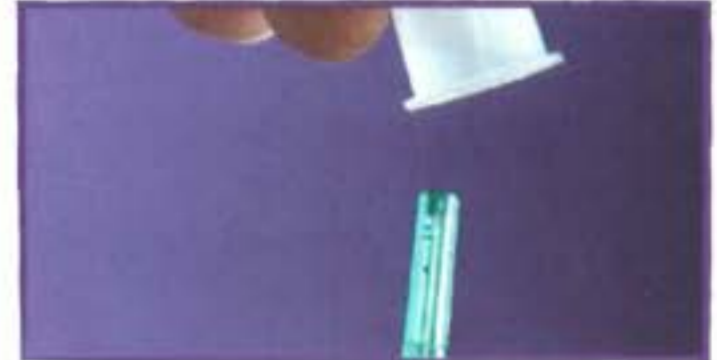

**Βιδώστε το**, έως ότου να σφίξει επαρκώς. Αφαιρέστε το εξωτερικό καπάκι της βελόνας.

## Ελέγξτε την πένα:

- Εάν δείτε μια μεγάλη φυσαλίδα αέρα, παρακαλώ ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην πίσω σελίδα. Εάν δεν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, η προγεμισμένη πένα είναι έτοιμη για χρήση. Παρακαλώ, ακολουθείστε το βήμα 2.



## Επιλέξτε τη δόση



**Περιστρέψτε** το χρωματιστό κουμπί επιλογής της δόσης-ένεσης. Καθώς το παράθυρο δόσης δείχνει μια πλάγια γραμμή, συνεχίστε να περιστρέφετε μέχρι να διαβάσετε "250". Μην πιέζετε ή τραβάτε το κουμπί επιλογής της δόσης ενώ το περιστρέφετε.




## Κάντε την ένεση



**Αφαιρέστε** το εσωτερικό χρωματιστό καπάκι της βελόνας. **Καθαρίστε** τη συνιστώμενη επιφάνεια με οινόπνευμα και περιμένετε λίγο έως ότου στεγνώσει. Κρατήστε την πένα με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι ανασπώστε το δέρμα γύρω από την περιοχή της ένεσης. **Πιέστε** τη βελόνα στο δέρμα, ακολούθως μπορείτε να ελευθερώσετε το ανασπκωμένο δέρμα. Πιέστε το κουμπί επιλογής δόσης σταθερά έως

ότου στο παράθυρο ένδειξης της δοσολογίας διαβάσετε το "0". Αυτό δείχνει πως το σύνολο της δόσης χορηγήθηκε. Με το κουμπί της ένεσης πατημένο, κρατήστε την πένα μέσα στο δέρμα για 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα και ενώ πατάτε το κουμπί της ένεσης, απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα.

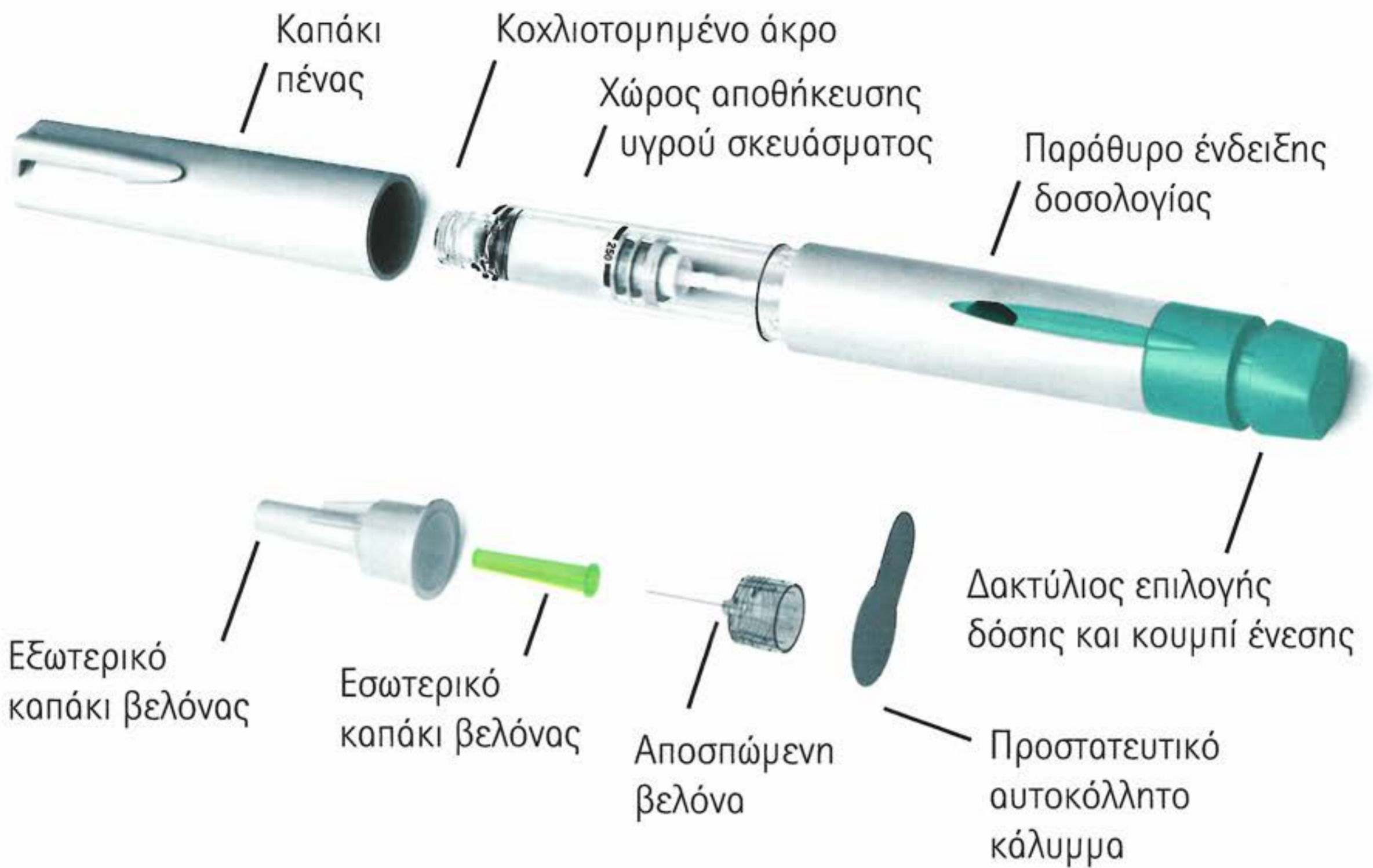

## Απομάκρυνση μεγάλων φυσαλίδων αέρα

Μια φυσαλίδα αέρα θεωρείται μεγάλη, όταν κρατώντας την πένα σε θέση με την βελόνα να δείχνει προς τα πάνω, ο αέρας καταλαμβάνει το άκρο του χώρου αποθήκευσης του υγρού. Τότε πρέπει να απομακρυνθεί. Μην ανησυχήσετε για μερικές μικρές φυσαλίδες που ακουμπούν στα τοιχώματα του χώρου αποθήκευσης του υγρού.

Προσαρμόστε τη βελόνα όπως περιγράφεται στο βήμα 1.



Επιλέξτε με το κουμπί επιλογής δόσης το "•".

Αφαιρέστε το εσωτερικό χρωματιστό καπάκι της βελόνας. Κρατώντας την πένα σε θέση με την βελόνα να δείχνει προς τα πάνω, πιέστε το κουμπί της ένεσης.



Μια μικρή σταγόνα υγρού πρέπει να εμφανισθεί στο άκρο της βελόνας. Η προγεμισμένη πένα είναι έτοιμη προς χρήση.

Αν δεν δείτε υγρό στην άκρη της βελόνας, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία (συνολικά 2 φορές).

## Μετά την ένεση:

Ξανοβάλτε το εξωτερικό καπάκι της βελόνας και ξεβιδώστε τη χρησιμοποιημένη βελόνα. Απορρίψτε την κατάλληλα. Μην χρησιμοποιείτε την πένα μετά την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται πάνω στο κουτί. Φυλάσσεται σε ψυγείο (2°C-8°C). Μην καταψύχεται.